



【GM-18】

** 2014 年 3 月 20 日（第 6 版）

* 2012 年 11 月 1 日（第 5 版）

医療機器承認番号：22000BZX01584000

機械器具 5 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路（JMDN コード：37704000）

インスピロン ジャクソンリース麻酔回路

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 使用前に本品の接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実であり、漏れや閉塞がないことを確認すること。**
2. 本品が正常に動作しない場合、又は本品の使用が適切でないと判断された場合には、速やかに本品の使用を中止し、他の処置を講じること。[重篤な低酸素血症が発症するおそれがある。]

【禁忌・禁止*】


＜使用方法**＞

1. 再使用禁止。[本品はディスプレイ製品であり、再使用による機能低下、並びに交差感染のおそれがある。]
2. 本品を使用目的以外の用途には使用しないこと。[正常に機能しないおそれがある。]
3. 本品を改造しないこと。[改造により正常に機能しないおそれがある。]
4. 本品の滅菌は行わないこと。[製品に変形及び破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。]
5. フェノールやエーテルなどの有機溶媒やホルマリン系消毒剤は使用しないこと。[製品の変形及び破損のおそれがある。]
6. 可燃性の麻酔ガスの存在下では使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]
7. 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは酸素を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]
8. 使用中、排出バルブを閉鎖しないこと。[気道内圧が上がり、気道損傷を起こすおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

＜形状*＞

本品は未滅菌品です。

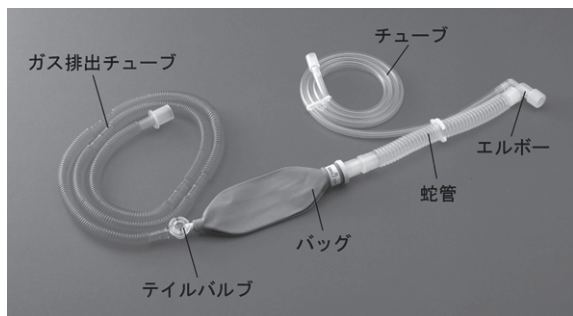

カタログ番号	製品名	バッグ	バッグの色
5104BVWNLK	インスピロンジャクソンリース麻酔回路 ノンラテックス 0.5L	ラテックスフリー	緑色
5101BVWNLK	インスピロンジャクソンリース麻酔回路 ノンラテックス 1L		
5102BVWNLK	インスピロンジャクソンリース麻酔回路 ノンラテックス 2L		
5105BVWNLK	インスピロンジャクソンリース麻酔回路 ノンラテックス 3L		

＜組成*＞

チューブ：ポリ塩化ビニル樹脂（フタル酸ジイソノニル）

＜作動・動作原理＞

麻酔器と気管内チューブなどの麻酔用器具とを接続・仲介することで、患者に麻酔ガス等を供給する。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞

本品は、麻酔システムの新鮮ガス供給装置から患者への医用ガスの送込に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

＜使用方法＞

1. 全てのコネクターを麻酔器、又は人工呼吸器に接続し、確実に接続されているかを確認する。
2. 麻酔器、又は人工呼吸器の電源、ガス源を接続する。
3. 二酸化炭素の再吸入を避けるために、ガス流量を患者の分時換気量の2～3倍に設定する。
4. 使用前に酸素を流した状態で排出バルブを閉鎖し、且つエルボーアダプターの呼吸器口を塞ぎ、バッグが膨らむことを確認する。
5. 排出バルブを開放し、患者に接続する。
6. 患者の呼吸音を確認し、胸郭の動き、回路内圧モニターの値を観察し、必要があれば人工呼吸器の設定を調整する。
7. 人工呼吸開始後、できるだけ早い時期に血液ガス分析を行い、換気状態を確認する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品を使用する前に麻酔器、又は人工呼吸器の添付文書及び取扱説明書をよく読みその内容を遵守すること。
2. 回路に体温モニターポート、圧力ポート、ガスサンプリングポートが含まれている場合には、使用前に各モニター装置の添付文書及び取扱説明書をよく読み、その内容を遵守すること。
3. 麻酔装置や監視装置、あるいは回路が原因でガス漏れが生じることがあるため、各種モニターには絶えず注意を払い、異常があれば直ちに原因解明に努めること。
4. 使用中にバッグに折れ、捻れがないか確認すること[適切な換気が行えないおそれがある。]
5. 使用後は、適切な方法にて廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意*

- (1) 取扱いに習熟した者以外は使用しないこと。
- (2) 他の製品と接続するときは、その互換性、安全性を十分確認した上で使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

＜有効期間・使用の期限（耐用期間）**＞

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【包装】

製品ごとに1個単位で包装（20入／箱）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等*】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋

電話番号：06-6223-0602

製造元**

ゲイルメッド社(台湾)

GaleMed Corporation

ゲイルメッド社(中華人民共和国)

GaleMed Xiamen Co., Ltd.